

# INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3



Prohibida la reproducción, copia, préstamo, alteración y difusión de este instructivo sin consentimiento por escrito del propietario intelectual.



Vamos componiendo una figura absurda; dibujamos con nuestros movimientos una figura idéntica a la que dibujan las moscas cuando vuelan en una pieza, de aquí para allá, bruscamente dan media vuelta, de allá para aquí, **eso es lo que se llama movimiento browniano**, ¿ahora entiendes?, un ángulo recto, una línea que sube, de aquí para allá, del fondo al frente, hacia arriba, hacia abajo, espasmódicamente, frenando en seco y arrancando en el mismo instante en otra dirección, **y todo eso va tejiendo un dibujo, una figura, algo inexistente** como tu y como yo, como los dos puntos perdidos en París que van de aquí para allá, de allá para aquí, haciendo su dibujo, danzando para nadie, ni siquiera para ellos mismos, **una interminable figura sin sentido**.

**Fragmento del capítulo 34 de la novela *Rayuela*, de Julio Cortázar**




## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

### Bienvenida.

Está a punto de iniciar la GRAN AVENTURA de aprender a usar el **Cargador de Mitocondrias Multiterapia Modelo C3**.

Junto con el Cargador, usted recibe una invitación para **CERTIFICARSE** como Terapeuta Mitocondrial. Revise la liga que le fue enviada para obtener más información al respecto. Usted debe especializarse para saber hablar de células, mitocondrias y de la interesante tecnología que está a punto de utilizar

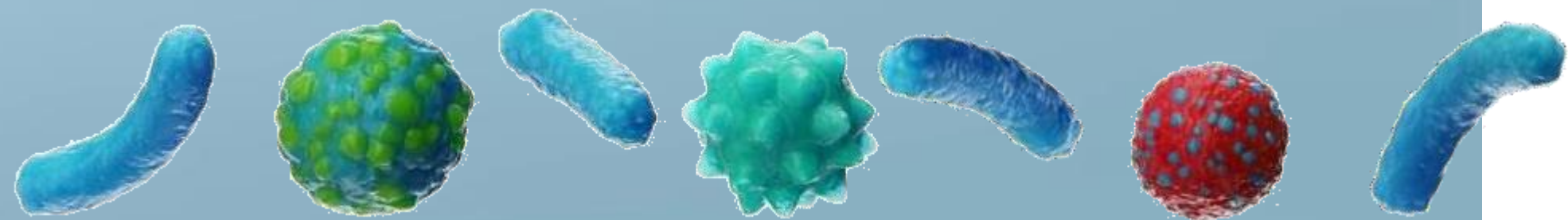


# INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Equipo.

Recibió **un equipo** que consta de:

1. Cuerpo
2. Display / USB
3. 4 Electrodo (reutilizables)
4. Cable de carga con eliminador
5. Cable de carga adicional

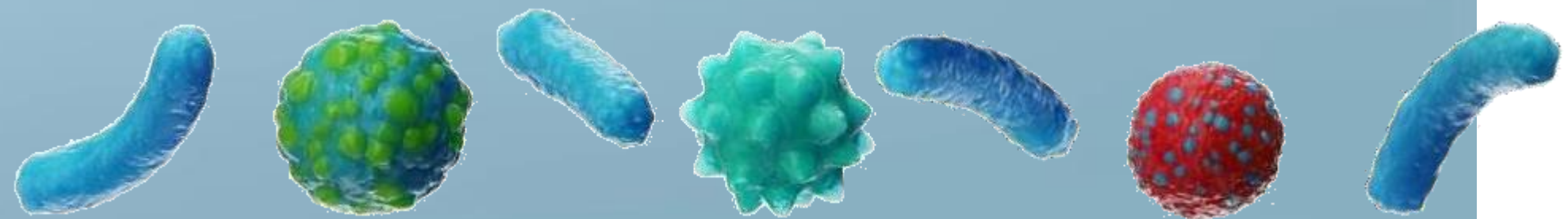


# Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

## Equipo.

Desempaquete:

- a) **No golpear**
- b) **No tirar**
- c) **No oprimir botones del display**
- d) **No jalar cables**

# INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

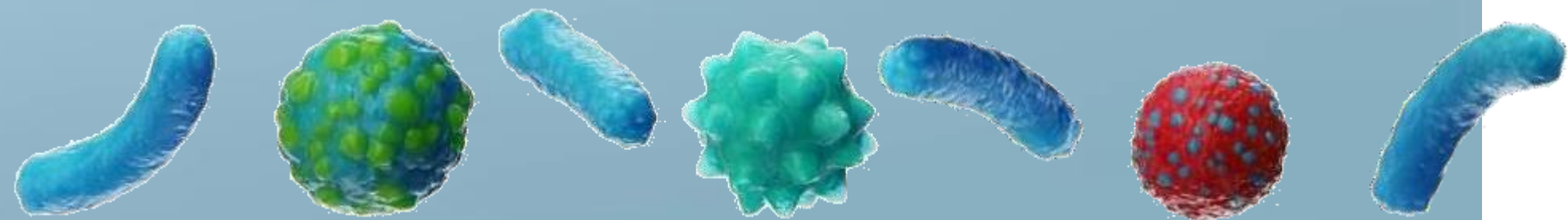





## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Conecta.

El equipo llegó **precargado**. No es necesario ponerlo a cargar 5 horas.

Se sugiere **conectarlo a un eliminador de picos (regulador de corriente)** con el fin de evitar que las variaciones de corriente provoquen descomposturas.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

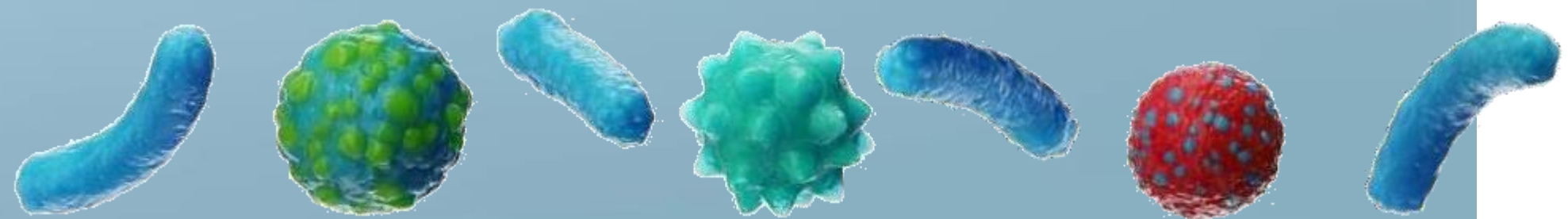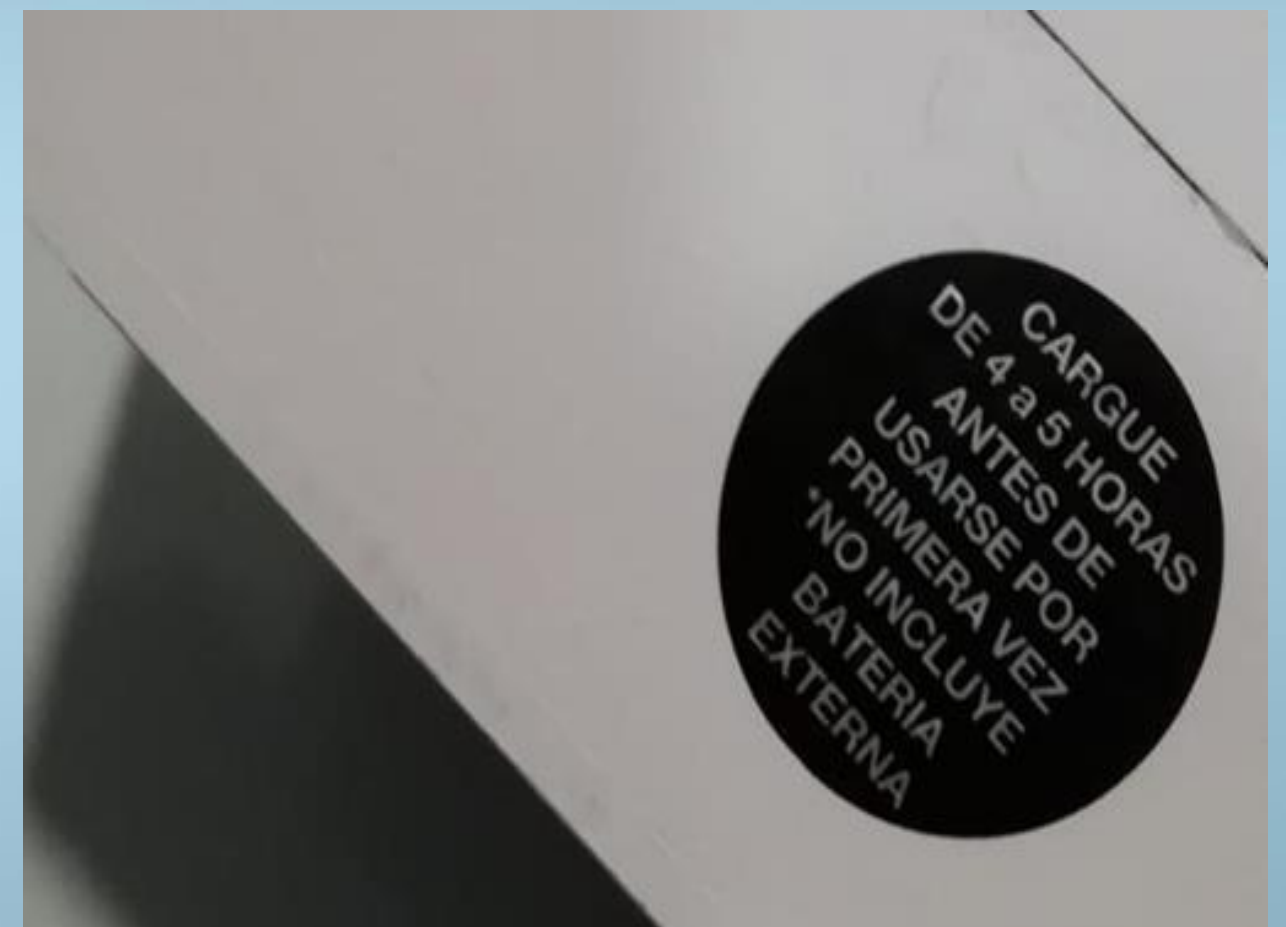


## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Conecta.

Conecte el **cable de carga al display frontal** y el eliminador a la corriente eléctrica casera. Este equipo genera una salida de potencia de 5 watts, una señal máxima de 80 decibeles y una impedancia por canal de 2 Ohms. **Es seguro para cualquier persona.**

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

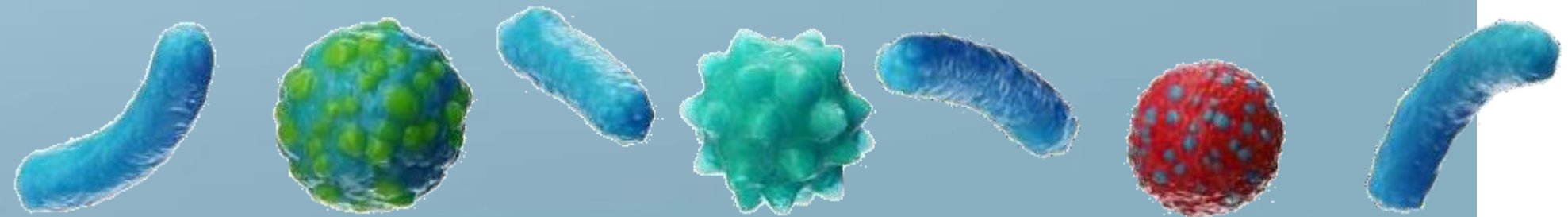


## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Electrodos.

El cargador de mitocondrias utiliza 4 **(cuatro) electrodos**. Estos se colocan en el **cuerpo del paciente por pares** (rojo-negro) en cada lado de su cuerpo sin importar si la pinza negra o roja va en la parte superior o inferior.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

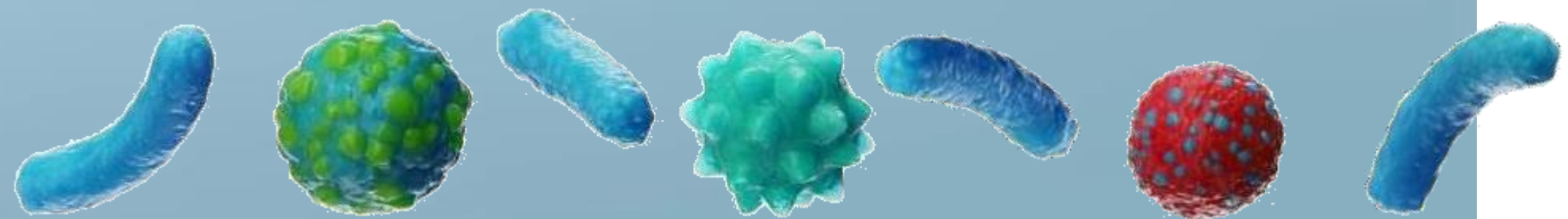




## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Electrodos.

Coloque los electrodos reutilizables y sanitizables en el cuerpo del receptor, de acuerdo al padecimiento.

Oprima la **burbuja azul** para crear el vacío necesario que provoca la “ventosa” de agarre. Practique para evitar generarle marcas o ampollas al usuario.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

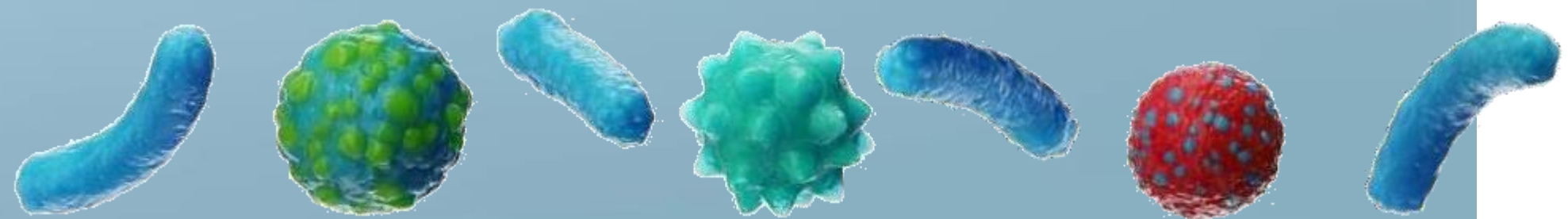

## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias



### Colocación.

Puede colocar **electrodos descartables** en el cuerpo del usuario, sobre todo si tiene piel delgada o delicada.

### Ejemplo de colocación:

Metástasis, Mantenimiento inmune.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

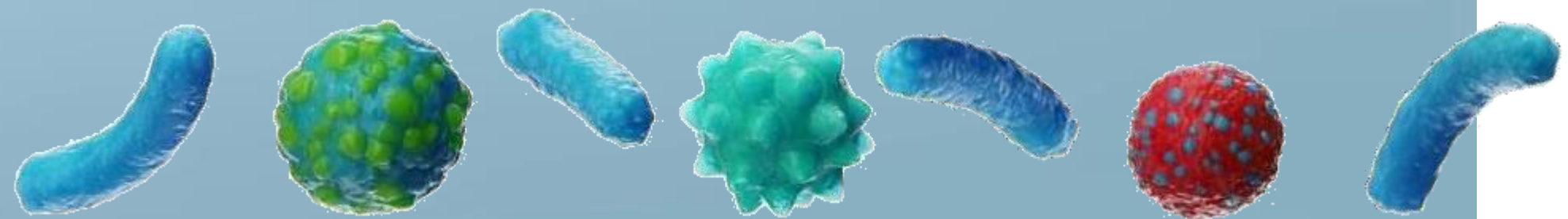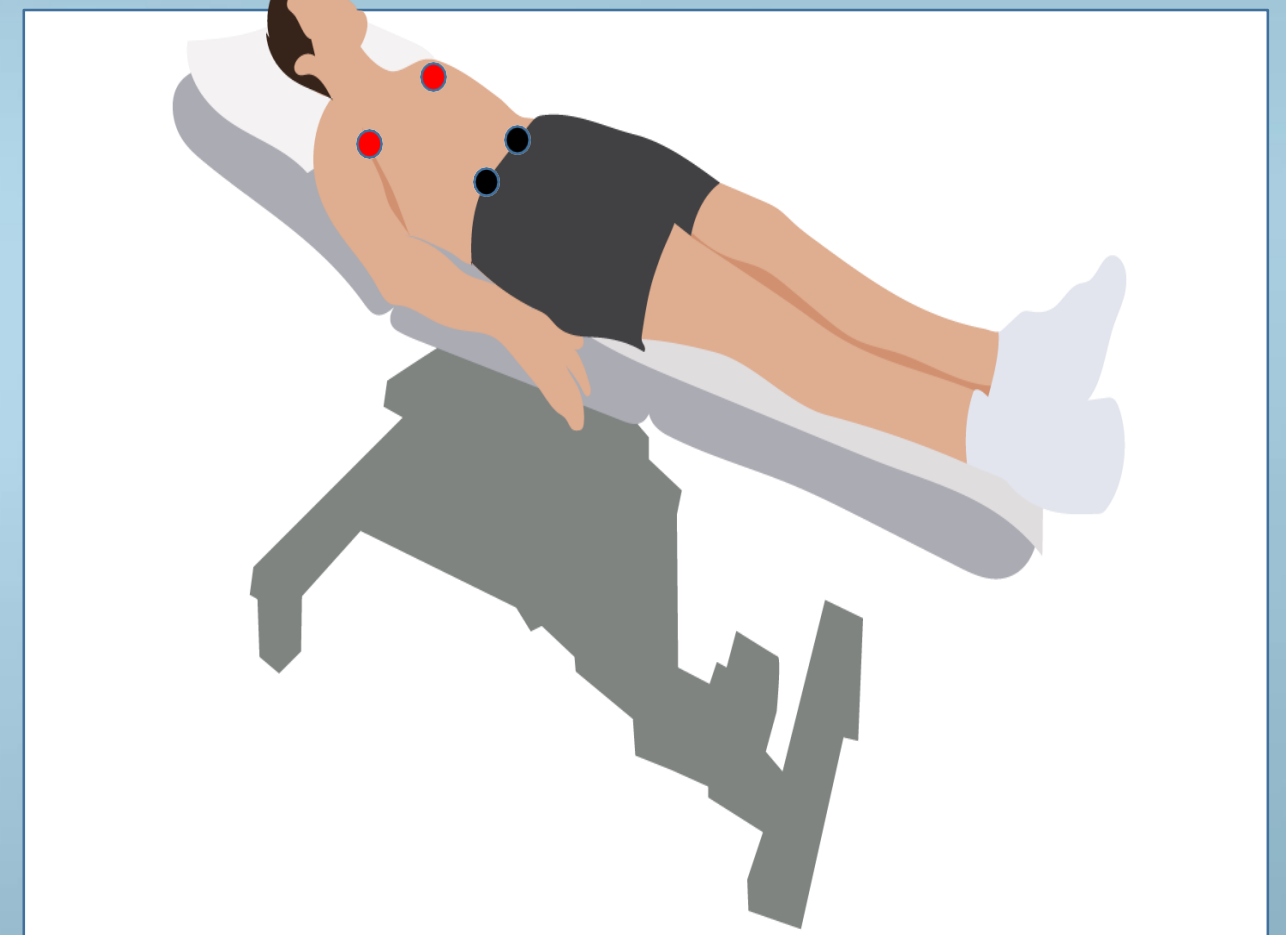



## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Enciende.

Oprima el **interruptor ON-OFF**.  
Inmediatamente después se  
encenderá el display, indicando que  
ya está listo para operar.

Hay que esperar a que aparezca en  
el display la palabra **BLUE**  
titineando.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

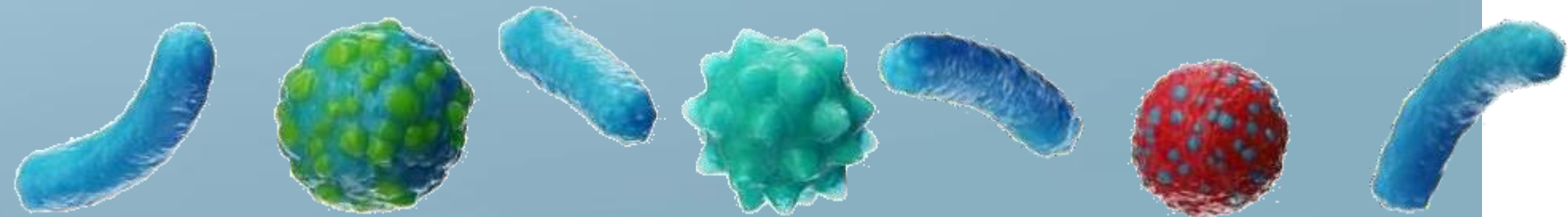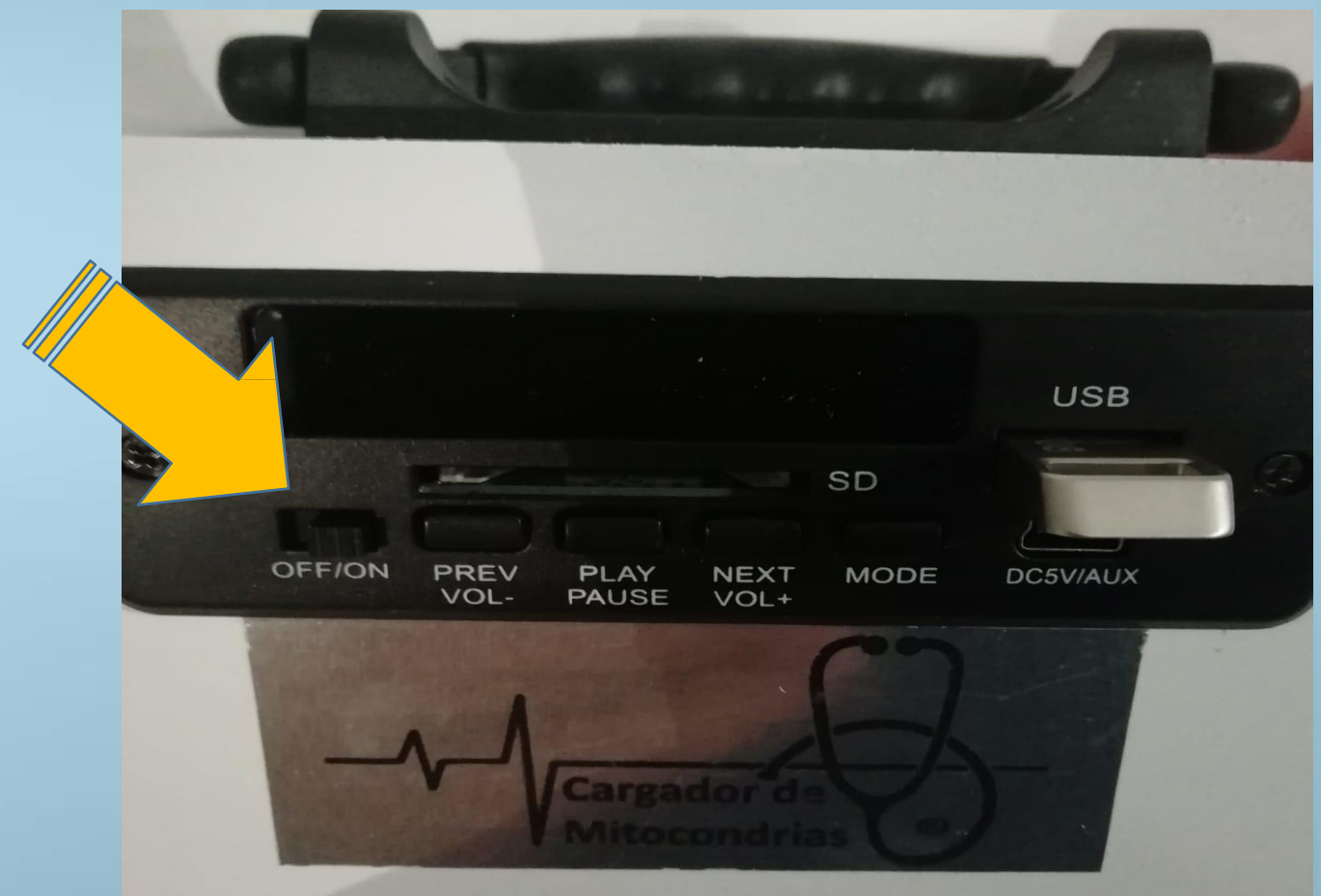





## Instrucciones de operación Cargador de Mitochondrias

### Enciende.

El Cargador lleva inserto una **memoria USB** que no debe moverse o retirarse en ningún momento.

La selección de terapias se realiza **por medio de las instrucciones** que presentamos a continuación.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

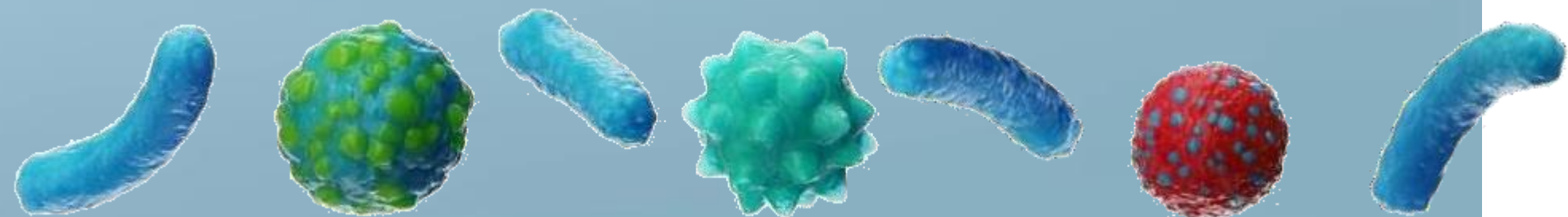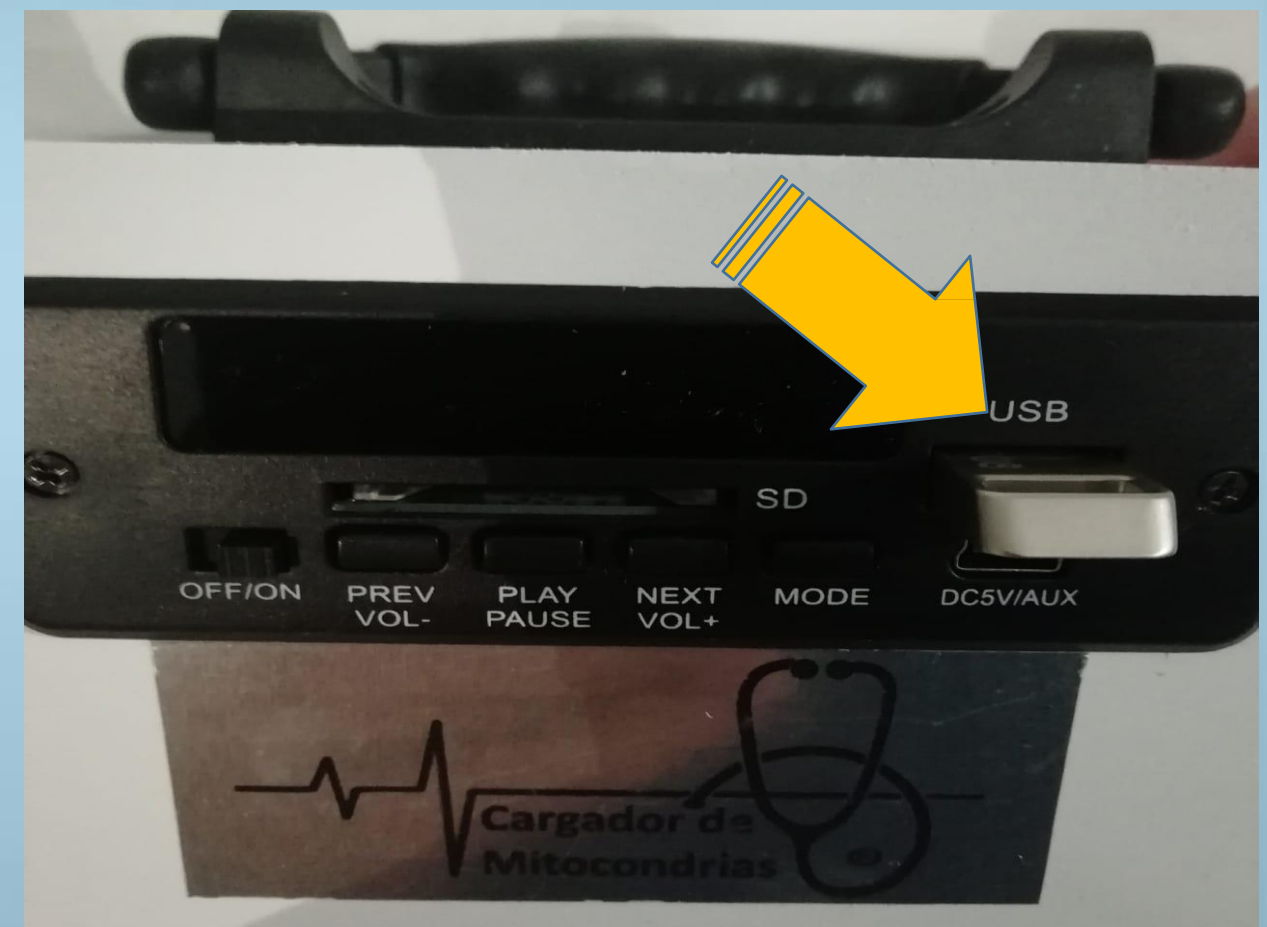


## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Inicia la carga.

Oprima el botón **MODE** una sola vez.

Aparecerá la palabra **Lod** en el display, indicando **F001 (Terapia 1)** e inmediatamente después aparece el **contador de pulsos**. Si por error oprime más veces el botón **MODE**, el Cargador no iniciará su función. Tenga cuidado.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

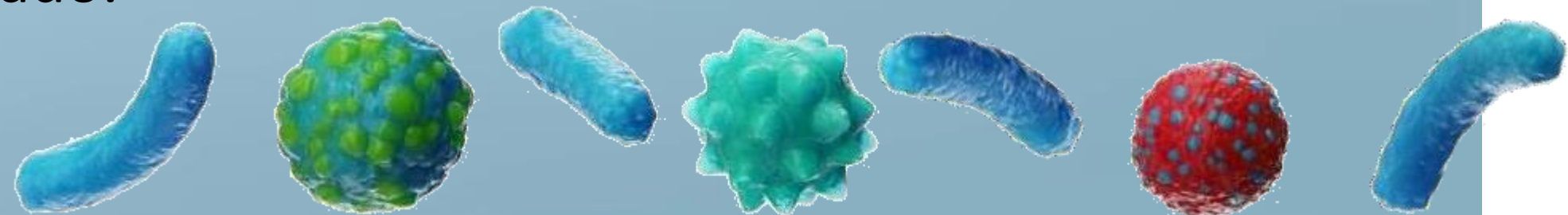


## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Inicia la carga.

Para elegir otra terapia, oprima de nuevo el botón **NEXT**.

Aparecerá en el display la numeración que indica la terapia a suministrar -**F001 (TERAPIA 1), F002 (TERAPIA 2), F00 3 (TERAPIA 3)...**x- y de inmediato arrancará un **contador de pulsos**.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

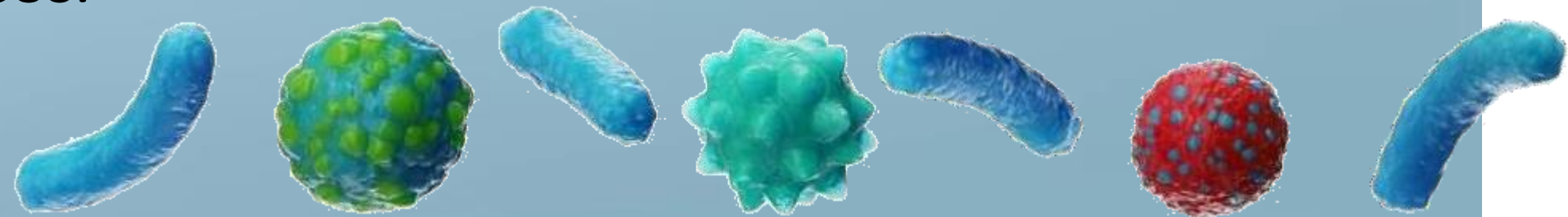



# Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

## Selección de la Terapia.

### Terapias disponibles.

El número de terapia y tiempo de administración han sido previamente definidos, no lo interrumpa o varíe.

- 1) Nombre de la Terapia
- 2) Tiempo y frecuencia de uso

# INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

- Derechos de Autor
- PRECAUCION
- 1 Sistema-inmune-15min
- 2 Alergia - Asma-
- 3 Hipotiroidismo
- 4 Prostatitis
- 5 Osteoartrosis
- 6 Diabetes
- 7 Rinitis
- 8 Afecciones cardiacas
- 9 Miomas
- 10 Dolor generalizado
- 11 Mers-Sars\_sistema-inmune\_covid





## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Selección de la Terapia.

Cada terapia tiene un tiempo mínimo de aplicación.

En la liga de instrucciones aparece la descripción de cada una de las terapias precargadas. Este procedimiento **NO ES INVASIVO Y COMPLEMENTA PERO NO SUSTITUYE** los procedimientos médicos.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

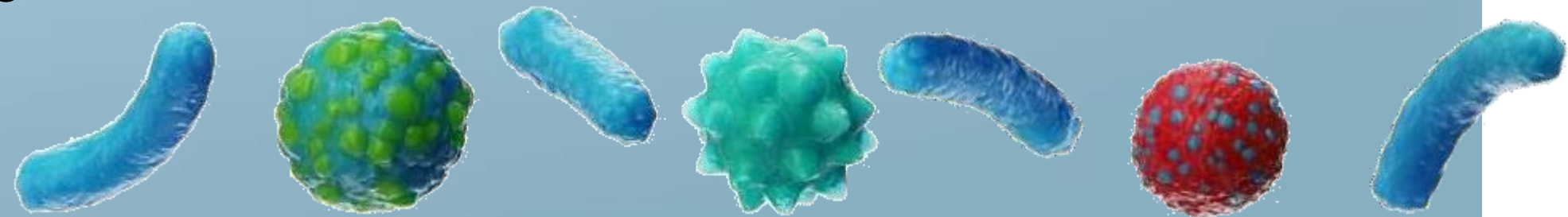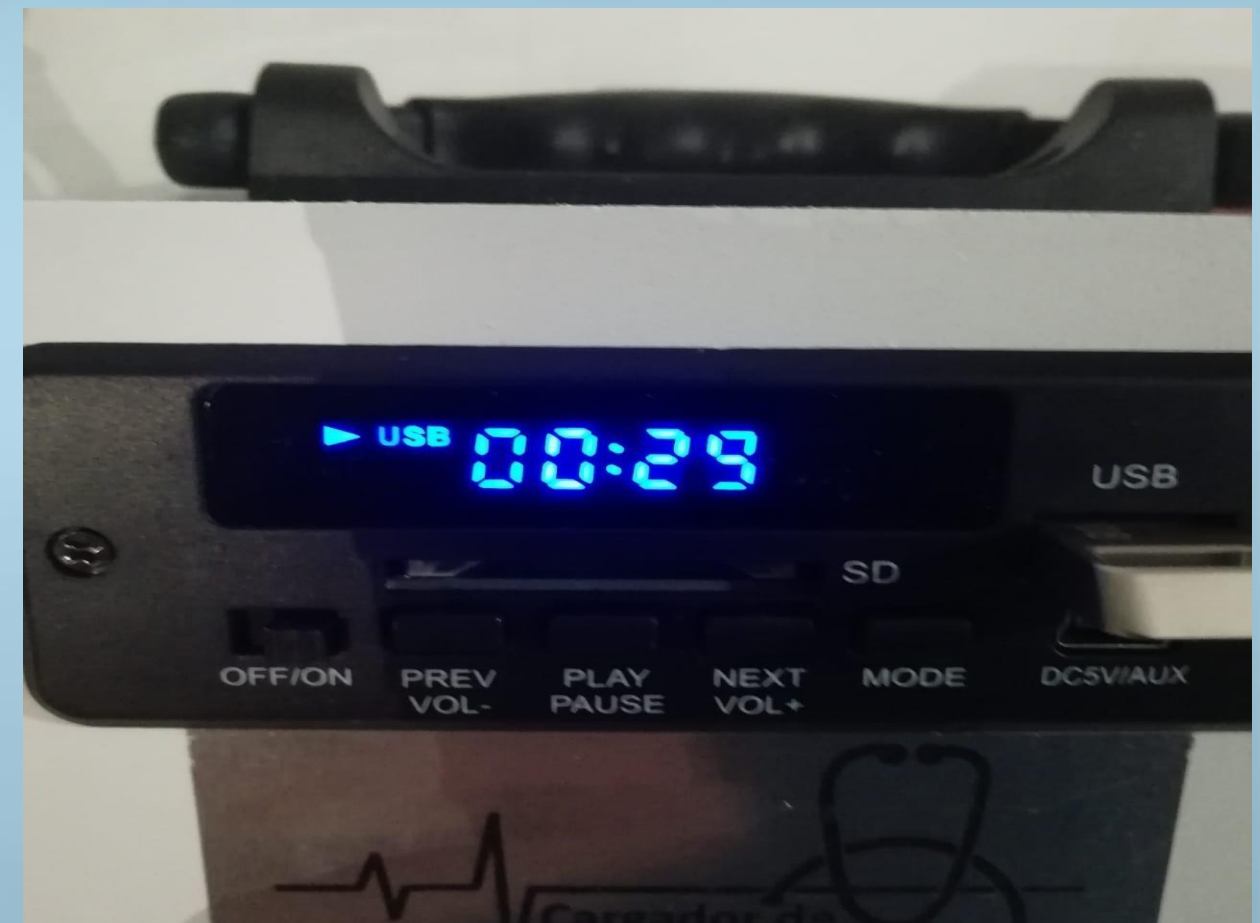


## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### 4 Consejos

Para asegurar que el consultante **NO TENGA RECAIDAS**, asegúrese de que ponga en práctica los 4 CONSEJOS (vea detenidamente toda la información en la liga de instrucciones).

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

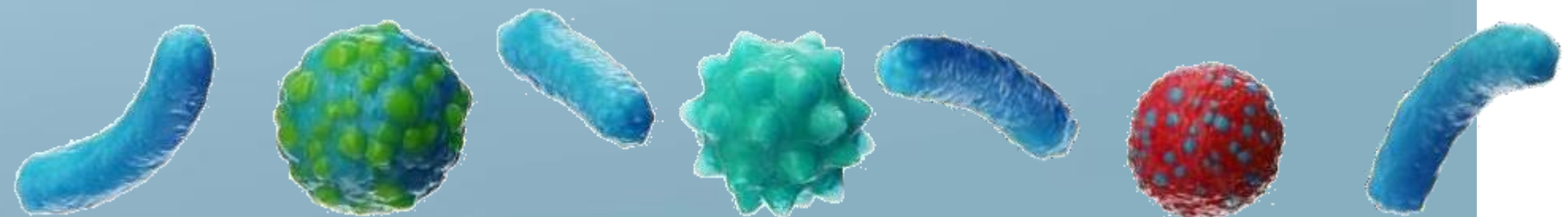





## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Al terminar la terapia

#### APAGUE EL EQUIPO

Oprima el interruptor a **OFF**.  
Inmediatamente después el equipo  
**apagará su display**, indicando que  
se encuentra fuera de servicio.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

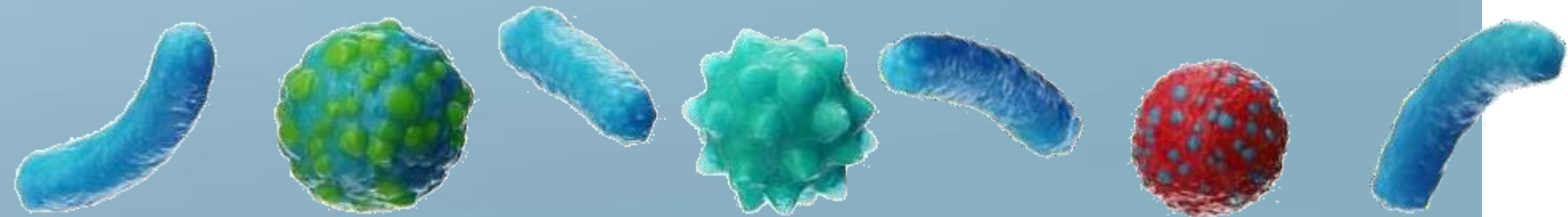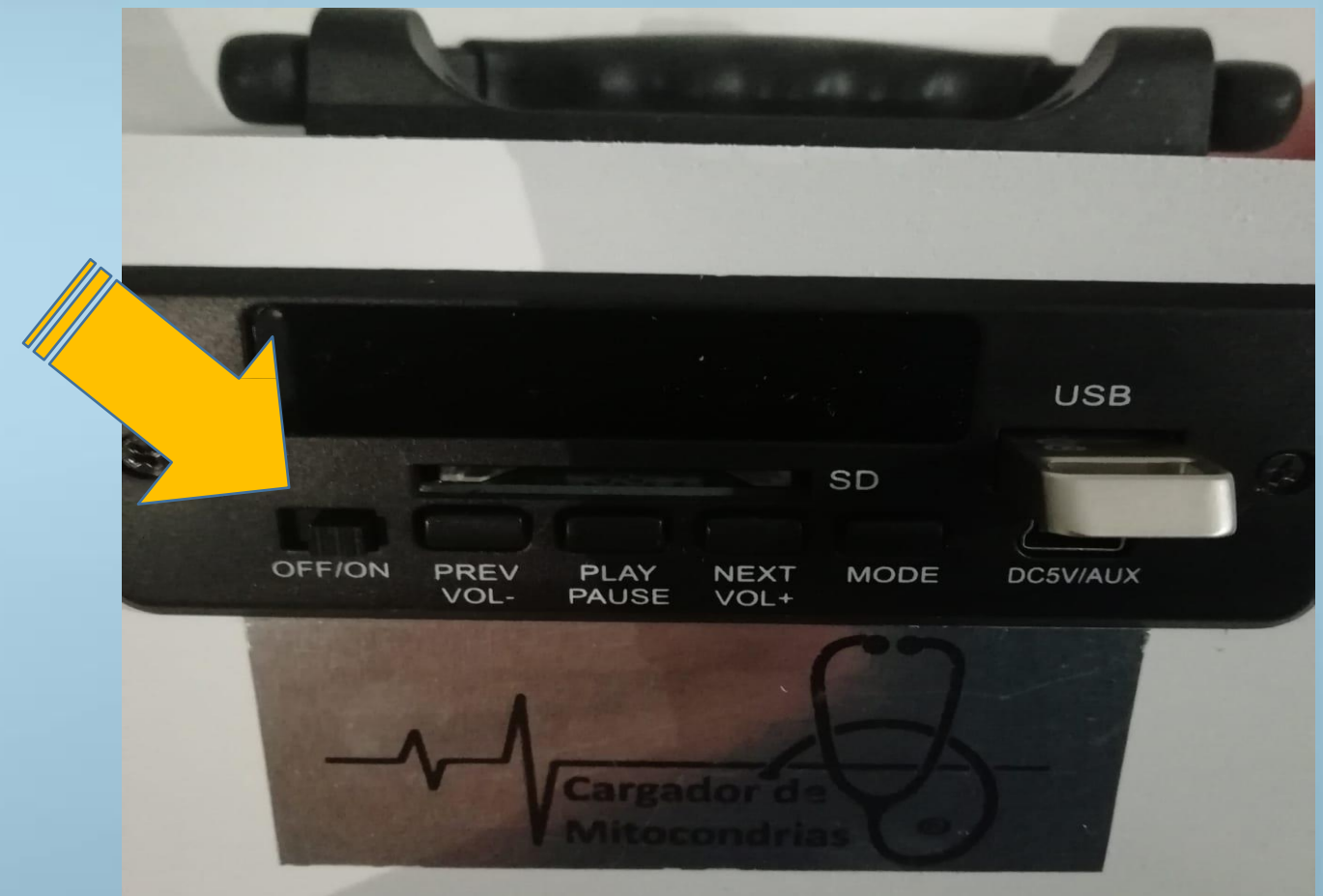


## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Al terminar la terapia

#### DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN

Desconecte el eliminador de la corriente eléctrica casera sujetándolo firmemente y jamás tirando del cable. **No lo tuerza**, evite la fatiga del cable y alguna falla posterior.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

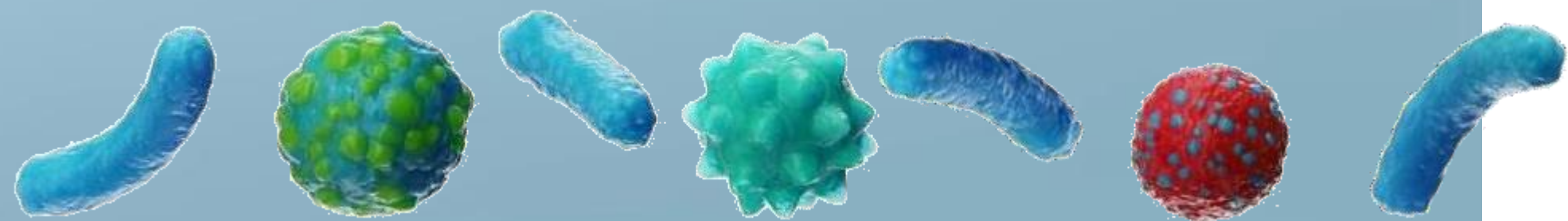

## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias


### Al terminar la terapia

#### RETIRE LOS ELECTRODOS DEL CUERPO

Oprima la perilla azul y retire los electrodos reutilizables y sanitizables del cuerpo del usuario.

Sanitícelos con un algodón y alcohol.  
Séquelos y guárdelos.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

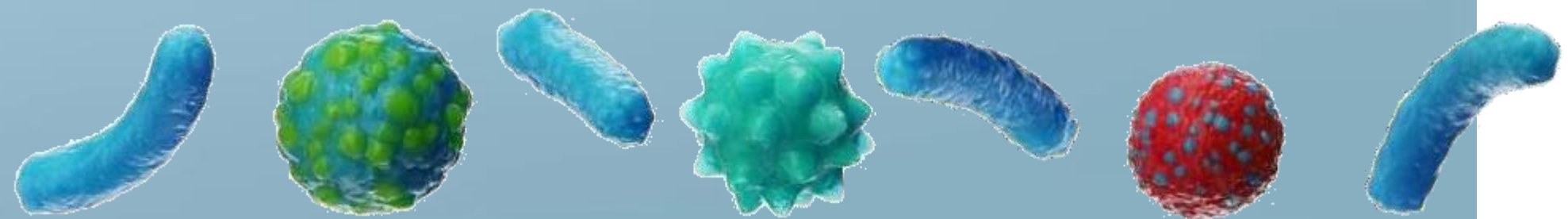



## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias


## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

### Accesorios y Mantenimiento.

Recibió junto con el equipo:

#### a) Cable de carga adicional

Este es un cable de emergencia. Algunas veces debido a una **manipulación excesiva** del cable de carga, el equipo deja de funcionar. Sustituyalo por este cable.


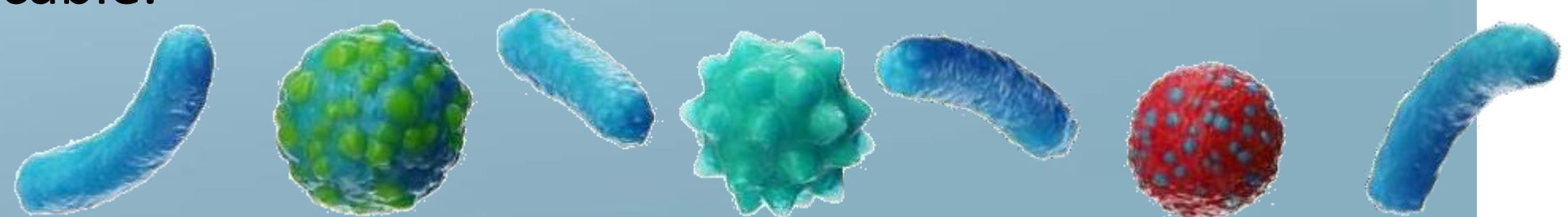


## Instrucciones de operación Cargador de Mitocondrias

### Mantenimiento.

En caso de falla o rotura, **el equipo completo** (incluido el controlador y cable adicional de carga) deberá ser enviado por DHL o FEDEX a la dirección que se le indique. Conforme a nuestra política publicada en: <https://www.energiamitocondrial.com/> el **cargo por reposición** del equipo dañado es de \$2500 pesos.

## INSTRUCCIONES DE USO CARGADOR MODELO C3

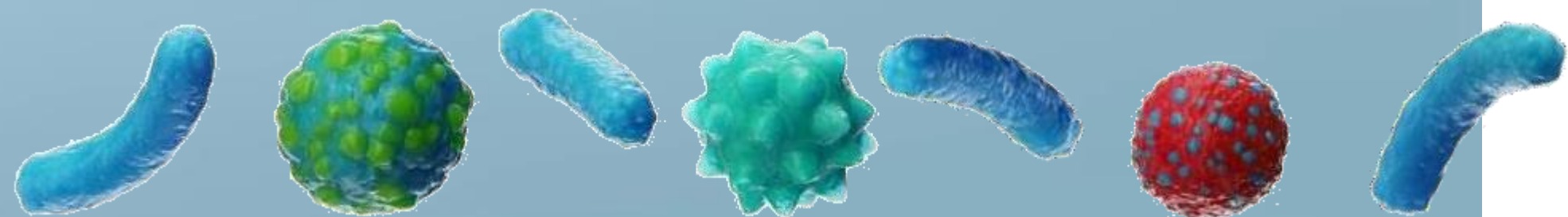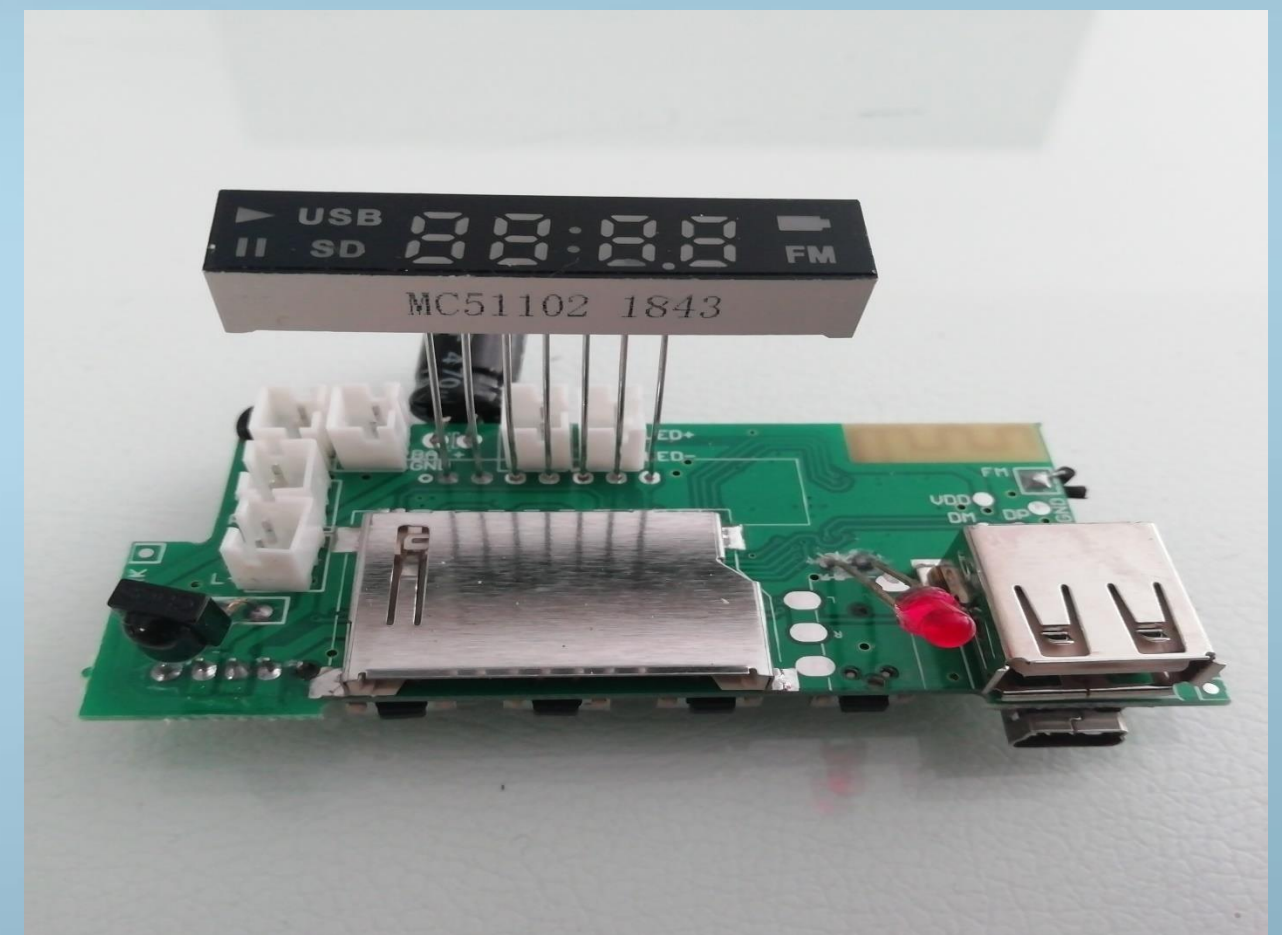





*Raúl Macías/ inventor del Cargador de Mitocondrias*

**MODELO C3**